

Das BOSTON™ Pflegesystem für harte, sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen

Da harte sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen aus einer neuen Generation von Kontaktlinsen-Materialien hergestellt werden, erfordert ihre Pflege besondere Sorgfalt zur Gewährleistung eines gesteigerten Tragekomforts. Das BOSTON™ Pflegemittel wurden speziell entwickelt, um den hohen Ansprüchen dieses Materials in Bezug auf eine optimale Verträglichkeit und Wirksamkeit gerecht zu werden.

Gebrauchsanweisung:

Bevor Sie Ihre Kontaktlinsen handhaben, waschen Sie sich die Hände mit einer milden Seife.

Der BOSTON™ Advance Linsenreiniger:

Stimmen Sie mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten ab, welche der beiden nachfolgenden

Reinigungsmethoden für Sie geeignet sind (Punkt 1):

1. Reiben Sie jede Seite der Linse sorgfältig mit einigen Tropfen des BOSTON™ Advance Linsenreiniger 10 Sekunden lang in Ihrer Handfläche - oder legen Sie die Linse auf die Kuppen des Zeige- und Mittelfingers und reinigen Sie die Linse unter geringem Druck durch Reiben mit dem Finger bzw. mit dem Daumen. Vergewissern Sie sich, daß die Oberflächen beidseitig gereinigt sind.
2. ENTFERNEN SIE ALLE SPUREN DER REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT DURCH GRÜNDLICHES SPÜLEN MIT FRISCHEM LEITUNGSWASSER.
3. Legen Sie die abgespülte Linse in den Behälter und füllen Sie soviel BOSTON™ Classic Aufbewahrungslösung hinein, daß die Linse gut bedeckt ist.

Die BOSTON™ Classic Aufbewahrungslösung:

Bereiten Sie Ihre Kontaktlinsen wie folgt zum Tragen vor:

1. Nehmen Sie die Linse aus dem Aufbewahrungsbehälter, spülen Sie sie kurz unter fließendem Wasser ab und setzen Sie die Linse mit einigen frischen Tropfen der BOSTON™ Classic Aufbewahrungslösung ein.
2. Wenn Sie die Linse nur kurz aus dem Auge nehmen, reiben Sie beide Oberflächen mit einigen Tropfen der BOSTON™ Classic Aufbewahrungslösung ein, bevor Sie sie wieder einsetzen.
3. Nachdem Sie die Linsen morgens aufgesetzt haben, spülen Sie den Behälter aus und lassen ihn trocknen.

Vorsicht: Der BOSTON™ Advance Linsenreiniger ruft Augenreizungen hervor, falls er in die Augen kommt. Daher die Linsen nach dem Reinigen sorgfältig abspülen.

Um eine vollkommene Desinfektion der Linsen zu erreichen, sollte man sie über Nacht, oder mind. 4 Stunden in BOSTON™ Classic Aufbewahrungslösung legen. Falls die Irritation des Auges bestehen bleibt oder Schmerzen auftreten, sollten sie einen Augenarzt aufsuchen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Lösung nur einmal verwenden
- Berühren Sie mit der Spitze des Tröpfers keine fremden Gegenstände, da die Lösung steril ist und verunreinigt werden könnte
- Flaschen immer gut verschlossen aufbewahren
- Vor Handhabung der Linsen die Hände gründlich waschen
- Nach Einsetzen der Linsen den Aufbewahrungsbehälter mit Leitungswasser ausspülen und trocknen lassen
- Brauchen Sie die Lösungen vor Ablauf des auf der Flasche angegebenen Verfallsdatums auf
- Zu Ihrer Sicherheit sollte die Lösung innerhalb von (90) Tagen aufgebraucht werden
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren

BEWAHREN SIE IHRE LINSEN NIEMALS IM BOSTON™ ADVANCE LINSENREINIGER, SPÜLEN SIE DIE LINSEN NACH DEM REINIGEN IMMER GRÜNDLICH MIT FRISCHEM LEITUNGS-WASSER AB. BEWAHREN SIE DIE LINSEN AUSSCHLIESSLICH IN DER BOSTON™ CLASSIC AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG AUF. NICHT ZUR ANWENDUNG BEI WEICHLINSEN

Le système BOSTON™ pour l'entretien des lentilles de contact rigides perméables aux gaz

Mode d'emploi:

Une hygiène très stricte est indispensable. Les opérations doivent être effectuées dans l'ordre indiqué.

Solution de Nettoyage BOSTON™ Advance

(A utiliser avant utilisation de la SOLUTION DE CONSERVATION)

1. Nettoyage soigneux des mains.
2. Pose des lentilles.
3. Nettoyage avec quelques gouttes de la solution de Nettoyage BOSTON™ Advance en frottant délicatement pendant environ 10 secondes dans le creux de la main ou entre le pouce et l'index.
4. Rinçage abondant avec de l'eau courante.
5. Trempage dans la solution de conservation BOSTON™ Classic pendant toute la nuit (au moins 4 heures).

Solution de Conservation BOSTON™ Classic

(Pour trempage et désinfection pendant la nuit)

Pour porter vos lentilles après trempage:

1. Nettoyage soigneux des mains.
2. Retirez la lentille de l'œil. Appliquez quelques gouttes de solution de conservation BOSTON™ Classic fraîche.
3. Posez la lentille sur l'œil.
4. Si une lentille est temporairement retirée de l'œil, appliquez quelques gouttes de Solution de Conservation avant de redéposer la lentille sur l'œil.
5. Rincez bien l'œil sous l'eau courante chaude et laissez sécher à l'air.
6. Changez la SOLUTION chaque jour.

Mise En Garde:

La Solution de Nettoyage BOSTON™ Advance est irritante pour les yeux. Si la Solution de Nettoyage est accidentellement instillée dans l'oeil, enlevez vos lentilles et rincez immédiatement à l'eau courante. Si l'irritation des yeux persiste ou des douleurs apparaissent. Consultez votre docteur.

Précautions:

- Ne jamais réutiliser la solution
- Ne pas utiliser la solution de Nettoyage BOSTON™ Advance comme produit de trempage
- Ne pas toucher le bec verseur de la bouteille afin d'éviter une contamination de la solution
- Garder la bouteille fermée après utilisation
- Vider l'étui après la pose et laisser sécher
- Utiliser avant la date d'expiration marquée sur l'emballage
- Jeter le flacon et la solution quatre-vingt dix (90) jours après le premier usage
- Ne pas laisser à la portée des enfants

TOUJOURS TREMPER LES LENTILLES DANS LA SOLUTION DE CONSERVATION BOSTON™ CLASSIC. NE JAMAIS LES TREMPER DANS LE PRODUIT DE NETTOYAGE BOSTON™ RINCER TOUJOURS SOIGNEUSEMENT LES LENTILLES A L'EAU FRAICHE APRES LE NETTOYAGE ET LES CONSERVER A L'AIDE DE LA SOLUTION DE CONSERVATION BOSTON™ CLASSIC. NE PAS EMPLOYER AVEC DES LENTILLES SOUPLES

Il sistema BOSTON™ per la manutenzione delle lenti a contatto rigide gas permeabili

Modo d'impiego:

Un'igiene molto rigorosa è indispensabile. Le operazioni devono essere effettuate nell'ordine indicato.

Soluzione Detergente BOSTON™ Advance

(Da utilizzare prima della Soluzione Conservante)

1. Lavarsi accuratamente le mani
2. Togliere le lenti
3. Pulirle con alcune gocce di Soluzione Detergente BOSTON™ Advance, strofinandole delicatamente per circa 10 secondi nel palmo della mano o tra il pollice e l'indice
4. Risciacquare abbondantemente con acqua corrente
5. Lasciare le lenti immerse nella Soluzione Conservante BOSTON™ Classic per tutta la notte (o almeno per 4 ore)

Soluzione Conservante BOSTON™ Classic

(per la conservazione e la disinfezione durante la notte)

Per applicare le lenti dopo la conservazione:

1. Lavarsi accuratamente le mani
2. Togliere la lente dal contenitore. Versare qualche goccia di Soluzione Conservante BOSTON™ Classic fresca
3. Applicare la lente sull'occhio
4. Se la lente è rimossa temporaneamente dall'occhio, versatevi alcune gocce di Soluzione Conservante prima di riapplicarla sull'occhio
5. Pulire a fondo il contenitore sotto l'acqua corrente calda e lasciarlo asciugare all'aria
6. Sostituire la soluzione ogni giorno

Avvertenze:

La Soluzione Detergente BOSTON™ Advance è irritante per gli occhi.

Se la Soluzione Detergente venisse accidentalmente instillata nell'occhio, togliere le lenti e risciacquare immediatamente con acqua corrente.

Se l'irritazione dell'occhio dovesse persistere o comparissero dolori, consultare il medico.

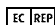
Precauzioni:

- Non riutilizzare mai la soluzione
- Non utilizzare la Soluzione Detergente BOSTON™ Advance come prodotto conservante
- Non toccare il beccuccio del flacone per evitare di contaminare la soluzione
- Dopo l'utilizzo, assicurarsi che il flacone sia ben chiuso
- Svuotare il contenitore porta-lenti dopo l'utilizzo e lasciarlo asciugare
- Utilizzare prima della data di scadenza indicata sulla confezione
- Gettare via il flacone dopo novanta (90) giorni dalla sua apertura
- Tenere lontano dalla portata dei bambini

CONSERVARE SEMPRE LE LENTI NELLA SOLUZIONE CONSERVANTE BOSTON™ CLASSIC. MAI CONSERVARLE NELLA SOLUZIONE DETERGENTE BOSTON™ ADVANCE. RISCIAQUARE SEMPRE CON CURA LE LENTI CON ACQUA FRESCA DOPO LA DETERSIONE E CONSERVARLE NELLA SOLUZIONE CONSERVANTE BOSTON™ CLASSIC. NON USARE CON LENTI A CONTATTO MORBIDE.

 Bausch & Lomb Incorporated
Rochester NY 14609 USA

 0050

 Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road, Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK
Prodotto in Italia

